

嚔下運動モニタ

B4S

(ビーフォーエス)

B4S アプリのアップデート マニュアル



本書は、嚔下運動モニタ B4S ユーザーに向けた説明書です。

嚔下運動モニタ B4S の専用アプリを最新版にアップデートするための方法について説明しています。

目次

目次	2
1. アップデート方法の概要	3
1.1 アップデートにあたり	3
1.2 アップデート作業の流れ	3
2. 準備	4
2.1 対象製品	4
2.2 ご準備いただくもの	4
3. インターネット接続	5
4. Google Play ログイン	6
5. B4S アプリのアップデート	7
6. 動作確認	8
7. Google アカウントの削除（必要に応じて）	10
8. インターネット接続の解除（必要に応じて）	11
（お問い合わせ）	12

1. アップデート方法の概要

1.1 アップデートにあたり

- 最新版の B4S アプリは Google Play から入手することができます。
- 最新版にアップデート後に、前のバージョンに戻すことはできませんので、変更する前に製品の管理者に確認をしてください。
- B4S アプリを、アンインストール、アップデートや再インストールを行っても、タブレット端末の内部ストレージに**保存された測定データは消去されません**。更新後のアプリで引き続き開くことができます。
- B4S アプリを、アンインストール、アップデートや再インストールを行っても、B4S 本体との**ペアリング情報は削除されません**。そのままお使い頂けます。
- B4S アプリは、必ず製品に付属する専用タブレットでご使用ください。他のスマート端末でも Google Play からインストールすることができますが、正常動作を保証するものではありません。機器のスペックにより、正しく動作しない場合や、画面表示が乱れることがあります。



1.2 アップデート作業の流れ

以下の流れでアップデートを行います。詳細は次項以降にて説明します。

- ① タブレット端末を **Wi-Fi** 環境でインターネットに接続する
- ② Google アカウントで **Google Play** にログインする
- ③ Play ストアから B4S 最新版をインストールする
※旧版を**アンインストール**してから最新版を**インストール**
- ④ B4S アプリに**アクセス権限を許可**する
- ⑤ B4S アプリの**動作確認**をする
- ⑥ Google **アカウントの情報**を削除する（必要に応じて）
- ⑦ **Wi-Fi 接続**を削除する（必要に応じて）


2. 準備

2.1 対象製品


本書は、以下の製品を対象としています。

販売名	製品名	製品番号	セット内容
B4S (ビーフォーエス)	B4S	HED B401	B4S 本体、CS センサ、タブレット端末
	CS センサ	HED B402	交換用 CS センサ
	B4S 本体	HED B403	交換用 B4S 本体
	タブレット端末	ZA5G0014JP	交換用タブレット端末

HED B403

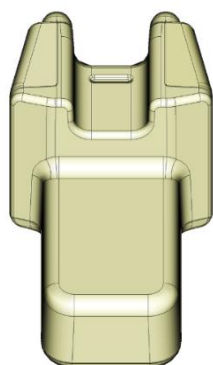

HED B402

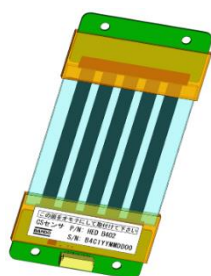

ZA5G0014JP



2.2 ご準備いただくもの

● Wi-Fi 環境

B4S タブレット端末をインターネットに接続できる環境が必要です。

ご使用環境でのワイヤレス通信を確認してください。(SSID・パスワード)

Wi-Fi 環境が無い場合は、モバイルルーターや携帯端末のテザリング機能等を用意してください。



● Google アカウント

B4S アプリは google Play からインストールやアップデートを行うため、google アカウントが必要です。本製品の管理者に確認してください。(メールアドレス・パスワード)

Google アカウント




● 本製品 (3.1 項)

インストール後に動作確認を行うため、製品をご用意ください。

タブレット端末については、バッテリー残量が消耗した状態では正しくインストールできない恐れがありますので、十分に充電をするか電源に接続してください。

本製品の基本的な使用方法は、製品に添付されている取扱説明書を参照してください。



● 単 4 形アルカリ乾電池 × 2 本

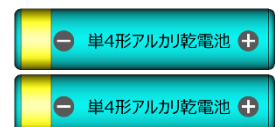

3. インターネット接続

① タブレット端末の起動

電源スイッチを長押ししてタブレットを起動します。ロック画面で、画面上部へスワイプをしてロックを解除します。

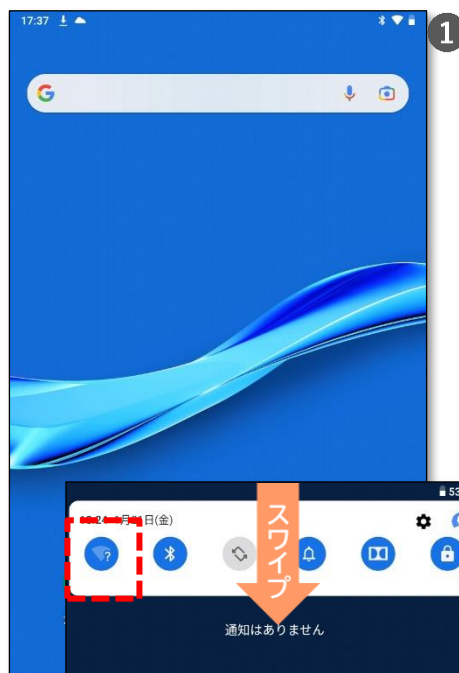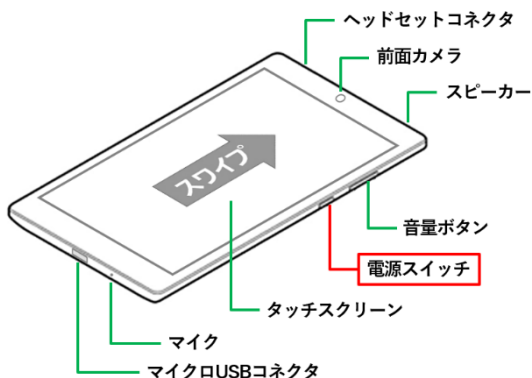

② クイックメニュー

ホーム画面で画面上部から下にスワイプしてクイックメニューを表示させます。



ボタンを長押しタップします。

③ WLAN

WLAN 画面で接続先を選択します。


④ パスワード

パスワードを入力し、接続をタップします。

● ボタンをタップしてホーム画面に戻り、画面右上の表示が、



になっていれば完了です。

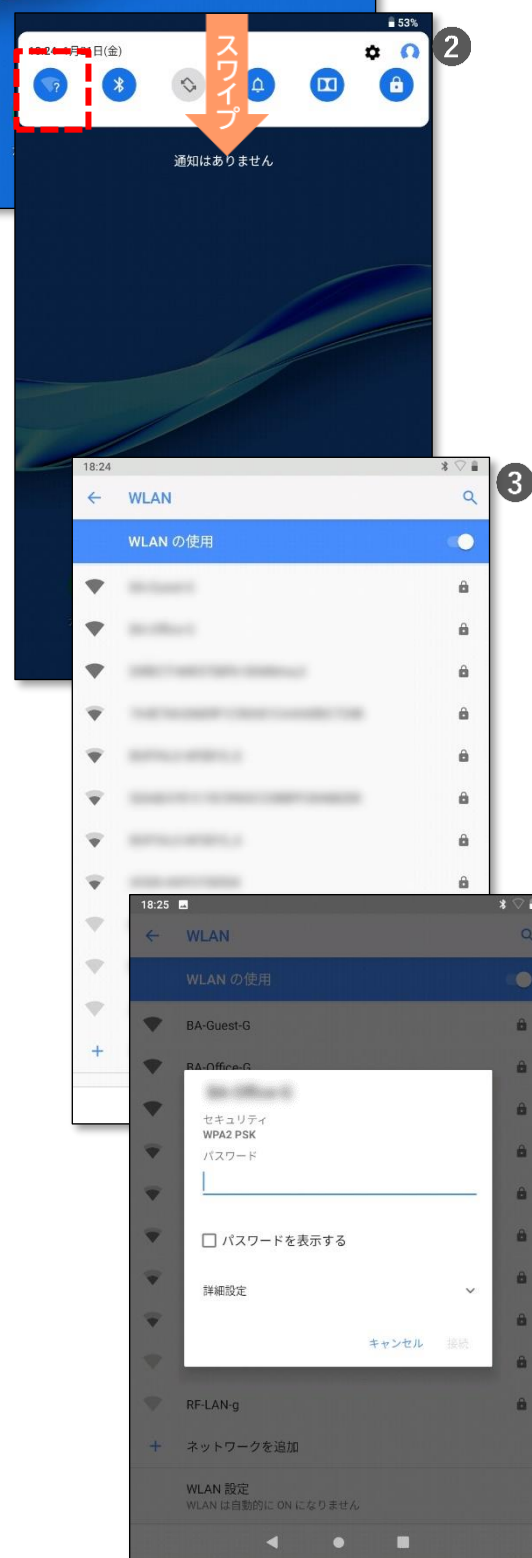




4. Google Play ログイン

① Play ストアを起動する

ホーム画面で下から上にスワイプし、
アプリを表示させます。
Play ストアアイコンをタップして起動します。

② Google Play にログインする

ログインをタップし、画面指示に従って
アカウント情報（メールアドレス、パスワード）を
入力します。
利用規約を読み、同意します。

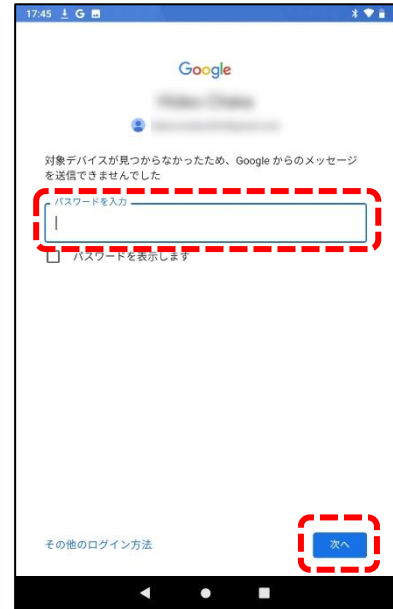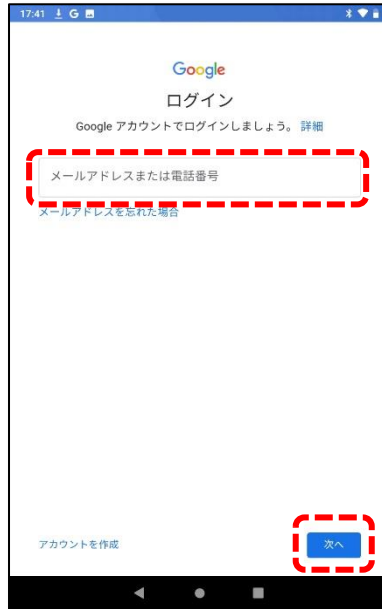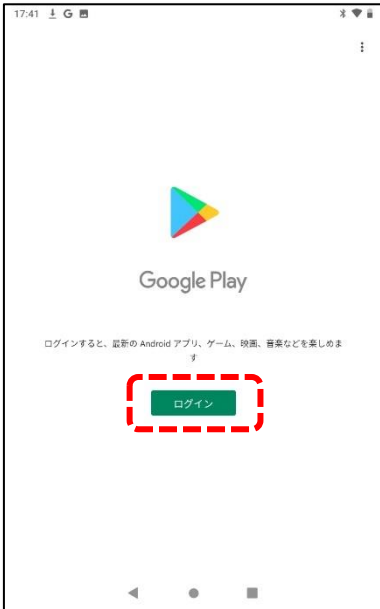

5. B4S アプリのアップデート

① アプリの検索

Play ストア画面が表示されます。
「B4S」と入力して検索します。

② アプリの選択

アップデートする B4S アプリを選択します。
※ここでは B4S カウントで説明します。

右図のように更新ボタンが表示されていても、
ここでは更新しません。



B4S カウントアイコンをタップします。

③ アンインストール

「アンインストール」ボタンをタップして、
古いバージョンをアンインストールします。

④ インストール

「インストール」ボタンをタップして、
最新版をインストールします。



5. B4S アプリのアップデート


⑤ アイコンの整理

- ボタンでホーム画面を表示します。

インストール後は、アイコンの位置が右図のようになります。

アイコンを長押しタップすると位置を変更できますので、整理します。

(右図は出荷時の配置)

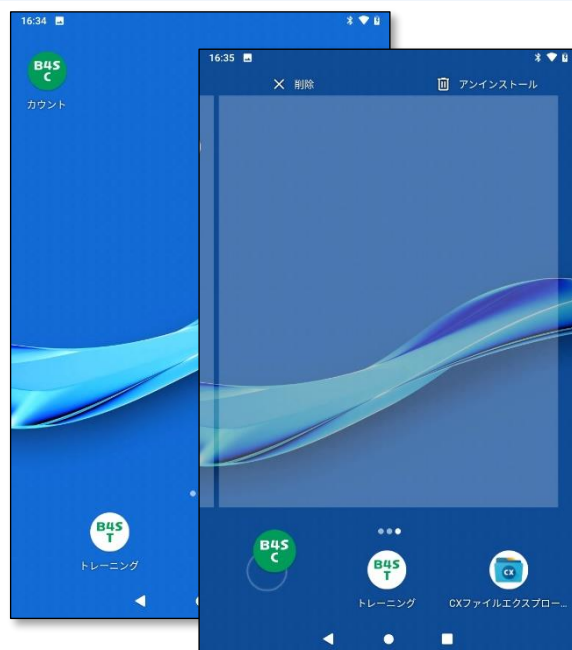


6. 動作確認

以下の方法で動作確認を行ってください。

① B4S アプリを起動

B4S アイコンをタップして起動します。インストール後の最初の起動時のみ、スプラッシュ画面の後に、ポップ画面が表示され、アプリのアクセス権限の許可を求められます。

“位置情報のアクセス”および“写真、メディア、ファイル”へのアクセスを許可してください。(③へ)

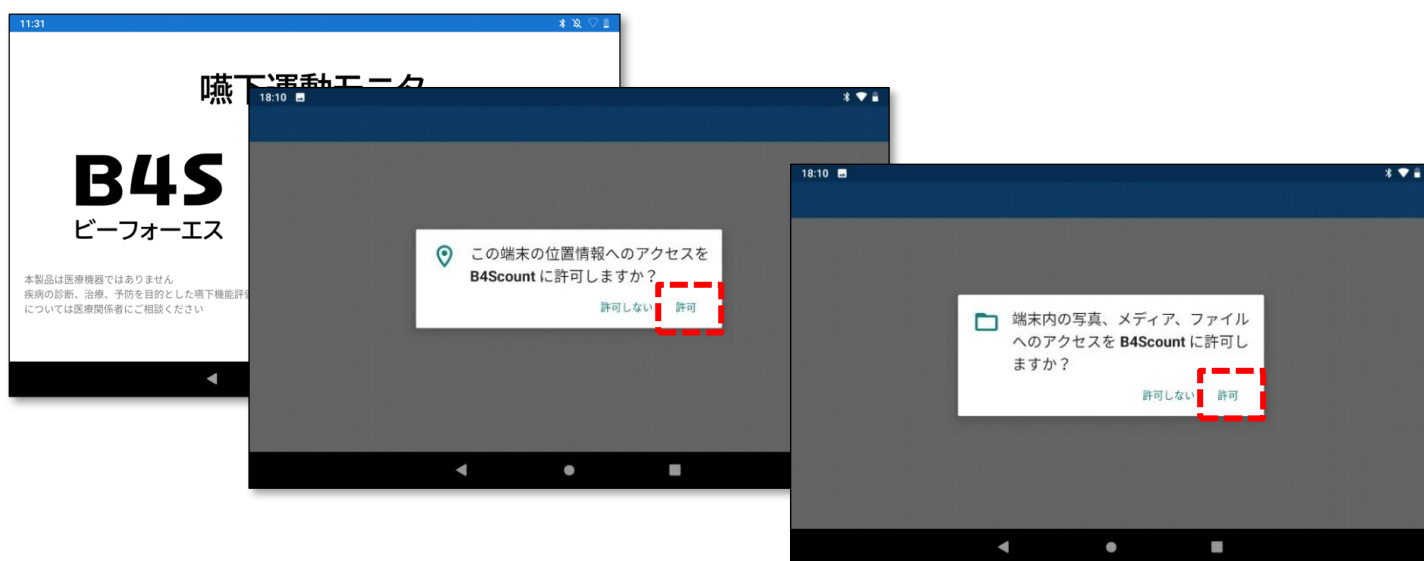

誤って許可しないをタップすると、アプリが停止し、起動できません。

その場合は②に記載の方法で権限を許可してください。


6. 動作確認

② アプリの権限

誤って許可しないをタップしてしまった場合は、ホーム画面の B4S アイコンを長押しタップして、“アプリ情報”をタップします。



アプリ情報画面で、“権限”をタップします。

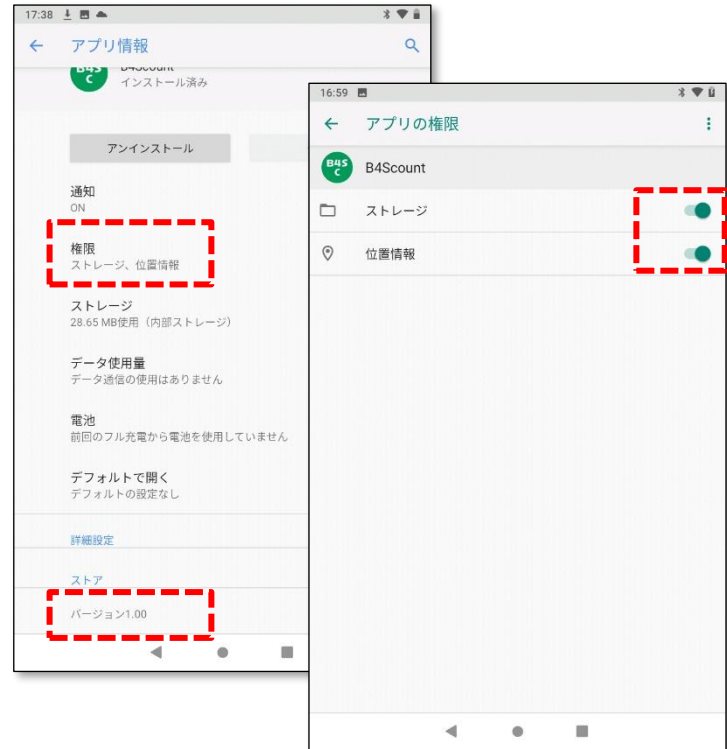

“ストレージ”を ON にします。

“位置情報”を ON にします。

なお、

この画面の最下欄で現在のバージョンを確認することができます。


③ バージョンの確認

最新版になっていることを確認します。

6 項に記載した方法で Play ストアを開き、B4S アプリを開きます。

“新機能● →” をタップします。

リリースされている最新のバージョン No が確認できます。

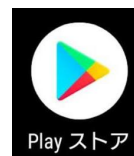

④ 動作確認

ご使用前になる前に、



B4S 本体での動作確認をしてください。

(製品の取扱説明書「9.3 保守点検」を参照)

7. Google アカウントの削除（必要に応じて）

更新時以外は Google アカウントへログインせずに使用したい場合など、Google アカウント情報を削除する方法を示します。

- 1 Play ストア アプリを起動
- 2 アカウントアイコンをタップ
- 3 “google アカウントを管理”をタップ
- 4 アカウント名（メールアドレス）をタップ
- 5 “このデバイスのアカウントを管理”をタップ
- 6 削除するアカウントをタップ
- 7 “ アカウントを削除 ”をタップ
- 8 “アカウントを削除”をタップ

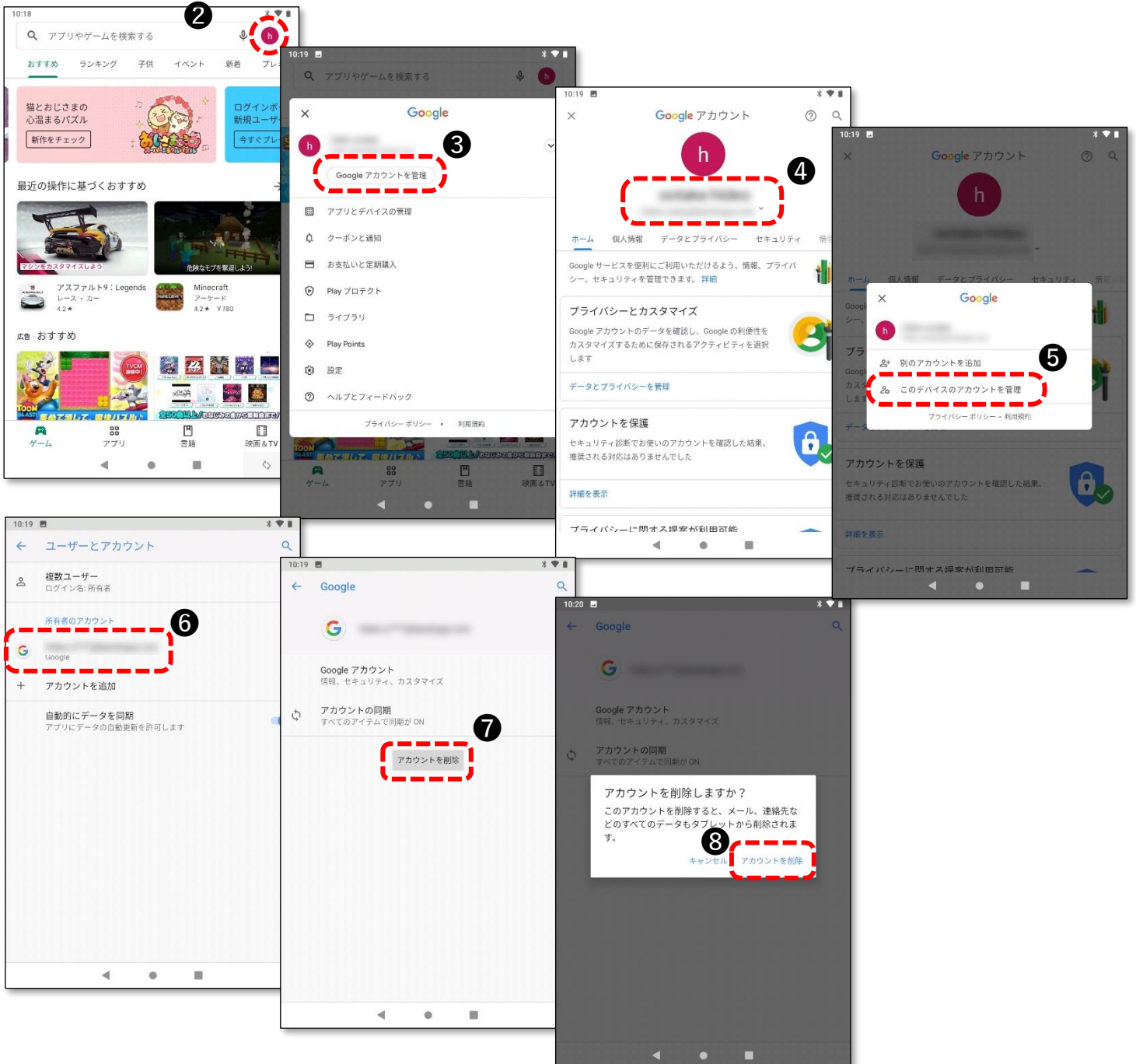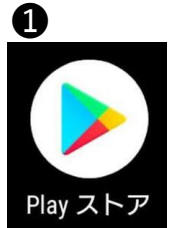

8. インターネット接続の解除（必要に応じて）

更新時以外はインターネット接続せずに使用したい場合は、Wi-Fi を OFF にするか、Wi-Fi 情報を削除してください。

① Wi-Fi の OFF

・クイックメニュー

ホーム画面で画面上部から下にスワイプしてクイックメニューを表示させます。



ボタンを短押しタップします。



に変わります。



② Wi-Fi 接続情報の削除

・クイックメニュー

ホーム画面で画面上部から下にスワイプしてクイックメニューを表示させます。



ボタンを長押しタップします。


・WLAN

WLAN 画面で接続先を選択します。

・削除

“削除”ボタンをタップします。

削除

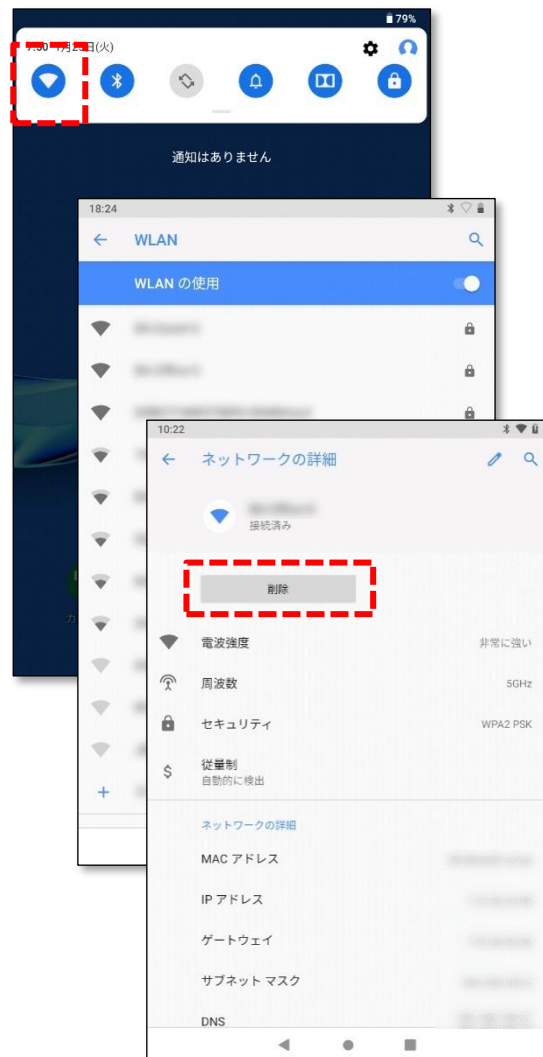

(発行元)

バンドー化学株式会社

〒650-0047 神戸市中央区港島南町4丁目6番6号

(お問い合わせ)

バンドー化学株式会社 新事業推進センター 営業部
医療ヘルスケア営業グループ B4S 営業担当

TEL (078)304-2024